

BlancOne® CLICK: a professzionális fogfehérítő kezelés ami teljesen megváltoztatja a rendelődöt

Az innovatív BlancOne® technológia alapján kifejlesztett BlancOne® CLICK egy forradalmian egyedülálló fogfehérítő kezelés, amely kombinálható a dentál-higiénés kezelésekkel.

Alacsony hatóanyag koncentráció mellett is hatékony

Elsőként tettük hatékonyá a rendelőben történő fogfehérítést alacsony hidrogén-peroxid koncentráció esetén is (<6%), amely a fogyasztók biztonságát szolgáló legfrissebb szabályozásnak, a 84/201-es európai irányelveknek is megfelel.



Nincs szükség ínyvédelemre

Kifejlesztettük az egyetlen olyan rendelői fogfehérítő kezelést, amely nem igényel külön védelmet a nyálkahártyán, kiiktatva ezzel az eljárás legidőigényesebb szakaszát, így a kezelés bárki által egyszerűen és biztonságosan elvégezhető a rendelőben.



Hatékony mindössze 10 perc alatt

A BlancOne® fotokémiai technológiának köszönhetően a 16%-os karbamid-peroxid lebontása (amely általában hosszú ideig tart), néhány perc alatt megtörténik. A kezelés sokkal gyorsabb és kényelmesebb, valamint együlésben kombinálható a higiéniái kezeléssel is.





Nincs fájdalom vagy érzékenység

A nagyon gyors reakciónak köszönhetően a BlancOne® rendelői kezelések nem agresszívak, nem szárítják ki a zománcot, és nem okoznak fájdalmat vagy érzékenységet. Valójában jelenleg ez az egyetlen olyan kezelés a piacon, amely nem tartalmaz deszenzibilizáló és remineralizáló hatóanyagokat.



Könnyen elérhető és megismételhető

A rövid idejű és alacsony költségű BlancOne® CLICK kezelés mindenki számára elérhető áron kínálható. Ideális első fogfehérítésnek, rendszeresen megismételhető és megalapozza az intenzívebb kezeléseket.

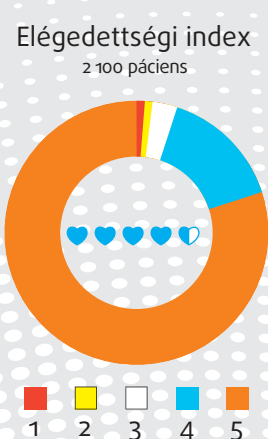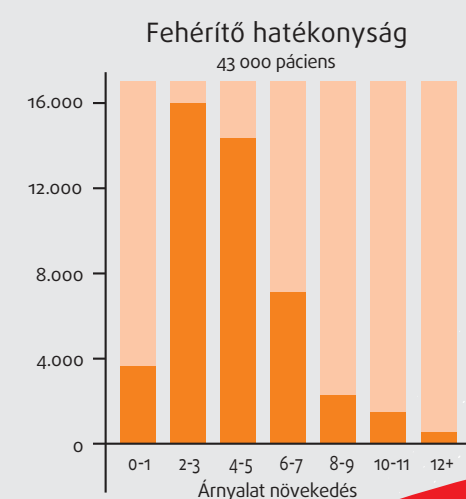

	Kezelés típusa	Indikáció	Aktív hatóanyag	Kezelési ciklus	Hatékonysági pontok
RENDELŐI KEZELÉS	Gyors fehérítés CLICK	Rendelői gyors	Karbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	1 x 10 perces applikáció*	 Hatékonyság Stabilitás
	Intenzív fehérítés TOUCH	Rendelői kozmetikai	Karbamid-peroxid 16% (HP 5,6%)	3 x 8 perces applikáció*	 Hatékonyság Stabilitás
	ULTRA	Rendelői klinikai	Hidrogén-peroxid 35%	3/4 x 8 perces applikáció*	 Hatékonyság Stabilitás
OTTHONI KEZELÉS	Otthoni fehérítés HOME FAST	Nappali gyors kezelés	HP 6.0% nHAP 0.5% Aktív vitamin booster	10-15 nap applikáció 45 perc /nap	 Hatékonyság Stabilitás
	HOME NIGHT	Éjszakai fehérítő kezelés Endododonciás fehérítő kezelés	CP 12% (HP 4.2%) nHAP 0.5% Aktív vitamin booster	10-15 nap applikáció egész éjjel	 Hatékonyság Stabilitás
	HOME EVER	Fogszabályozó sínek Érzékeny fogak Szintentartás	CP 7% (HP 2.4%) nHAP 1.0% Aktív vitamin booster	10-15 nap applikáció egész éjjel	 Hatékonyság Stabilitás
OTTHONI KEZELÉS	Szintentartás RITUALS	3 hónapos szintentartó program	BRUSH Fogfehérítő fogkefe DUETTO Active Folteltávolító fogkrém DUETTO Care Regeneráló fogkrém STICK - Fehérítő toll CP 16% (HP 5,6%) LIPS ajakvédő	Napi rendszeres használat	 Hatékonyság Stabilitás

* kizárólag Arcus fényaktivációs lámpával

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu


f blancone i blancone_ids v blancone
f blancone team pro (professional group)



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it www.idsdental.it

Rev 0 - 01/5/23

A BlancOne az IDS Spa bejegyzett védjegye

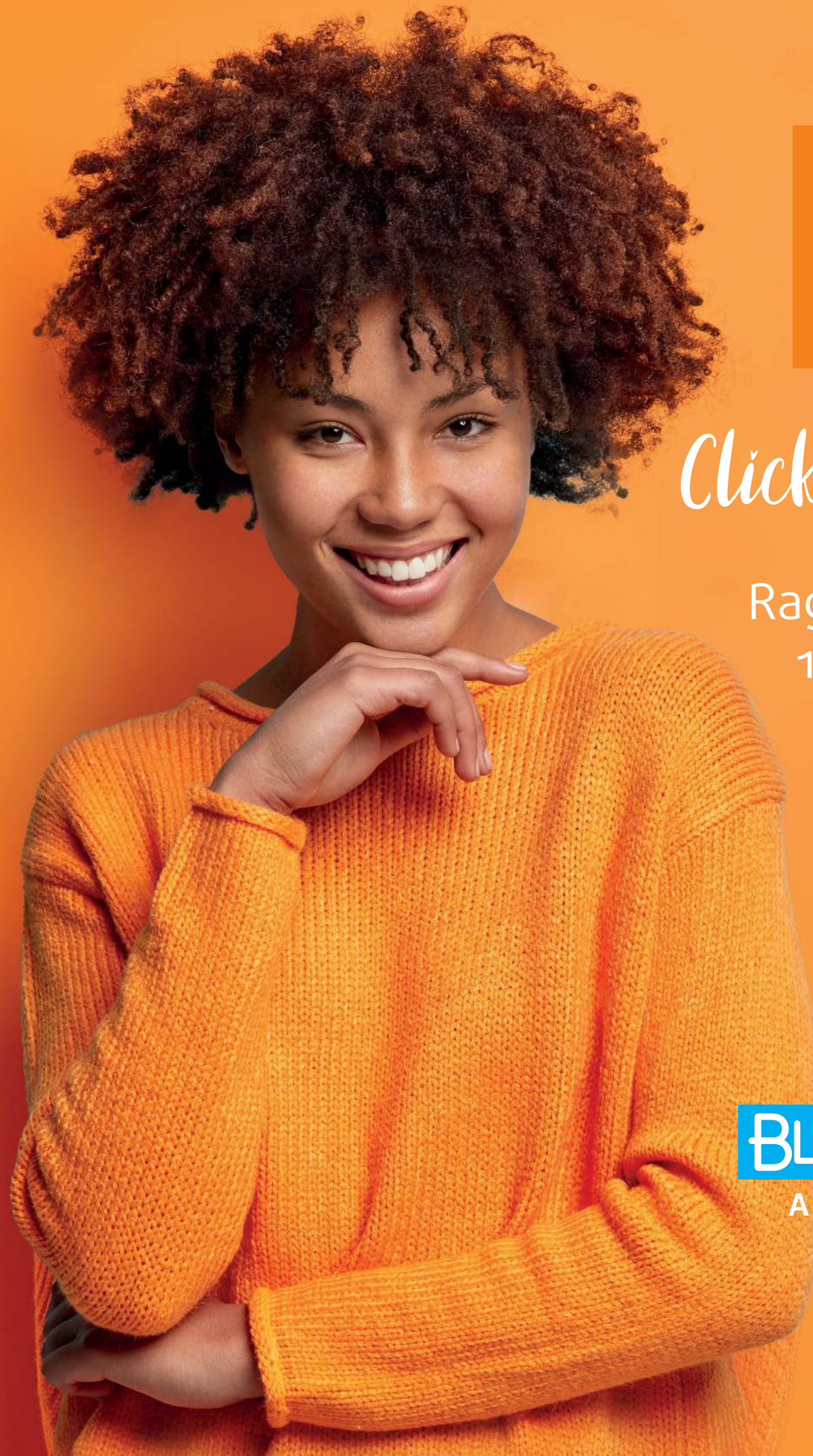

CLICK

Click your smile

Ragyogó mosoly
10 perc alatt

BLANCONE®

A Te Fogfehérítőd

BlancOne® : Az új mérföldkő a fogfehérítésben

A BlancOne® fogfehérítők új szemléletet képviselnek a fogfehérítő kezelésekben, amely 15 év kutatás során kidolgozott új fotokémiai technológia kifejlesztésén alapul.

Mára bizonyított tény, hogy a fogfehérítő lámpák által kibocsátott fény nem növeli a hatékonyságot, valamint a fogfehérítés során használt peroxidok hatását, hanem csupán a gélre átadott hő révén kissé felgyorsítja a reakciót.


A BlancOne® fotokémiai gélek két speciális összetevőt tartalmaznak a peroxidon kívül, amelyek képesek azt hatékonyan lebontani olyan sebességgel, amelyet a hagyományos fogfehérítő rendszerek kémiai reakciói nem érnek el.

- A FOTOSZENZITIZÁTOROK speciális színű hatóanyagok, amelyek fotonokat nyelnek el a kémiai reakciókhoz. A meghatározott hullámhosszúságú lámpa által kibocsátott fénnel "gerjesztett állapotba" kerülő fotoszenzitizer anyag jelentős mennyiségű energiát szolgáltat a kémiai folyamatához.

- A KATALIZÁTOROK szintetizálják ezt az energiát, és láncreakciót indítanak el, amely felgyorsítja a peroxidok lebontását.

Ez a "robbanásszerű" energia a folyamat során már néhány perc alatt felszabadul, és létrehozza az oxigén egyik nem radikális atomi változatát, a SZINGLET OXIGÉNT (1O2).

A szinglet oxigén sokkal gyorsabb, mélyebb és biztonságosabb oxidáló hatás kifejtésére képes a szabad gyökökhöz (ROS) képest, melyeket a hagyományos fogfehérítő rendszerek hoznak létre.

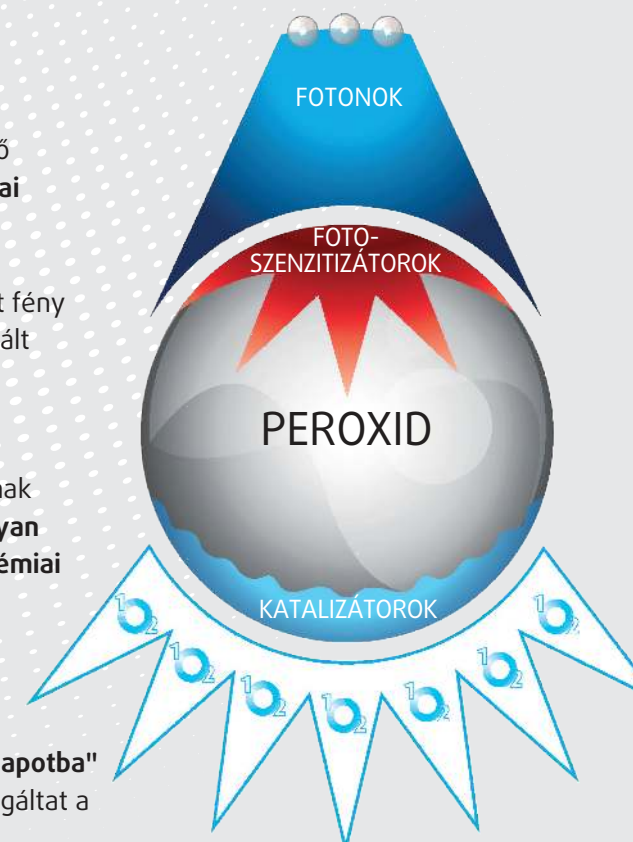

SZINGLET OXIGÉN



Applikált gél

5 perc eltetével

10 perc eltetével



BlancOne®
Video

Az egész kezdődhet akár egy CLICK-kel

Egy tipikus **4-5 árnyalatnyi fogfehérítés*** a páciensek számára általában már **magas költségeket jár**. A kényelmes, mindössze **néhány perces** kezeléssel a BlancOne® CLICK új koncepciója **IDEÁLIS kiindulópont** lehet, amelyet annak érdekében fejlesztettek ki, hogy minden páciens számára elérhető legyen, így kipróbálhatják az azonnali fehérebb és ragyogóbb mosoly élményét.

- ✓ **IDEÁLIS a fogfehérítés bevezetésében**
- ✓ **IDEÁLIS akiknek korlátozott a költségvetésük**
- ✓ **IDEÁLIS befejezés a higiéniai kezelések után**
- ✓ **IDEÁLIS eszköz a rendelő marketingjéhez**

Csak Olaszországban az elmúlt évben több, mint 100 000 BlancOne® CLICK kezelést végeztek el, ahol a páciensek elégedettségi indexe 4,5 volt az 5-ből.**

Ez azt jelenti, hogy a BlancOne® CLICK már most a fogorvosok és a páciensek első számú választása!

* A Vita Classic Shade Guide-hoz viszonyított árnyalatok kiértékelése alapján.
** A BlancOne® PRO alkalmazásában rögzített 109 560 esetről gyűjtött adatok alapján.



Most először
Ön is felkínálhatja rendelőjében az új,
fehérebb és ragyogóbb
mosoly örömét minden egyes
dentálhigiéniai kezelés után!

Fedezze fel programunkat:

BLANCONE
Clean&White
Dental Hygiene & Teeth Whitening



www.blancone.eu/pro/cleanandwhite

Hogyan érhetjük el a legjobb eredményeket a páciensek mosolyáért

Miután lenyűgözte pácienseit a BlancOne® CLICK kezeléssel, megmutathatja nekik **hogyan érhetnek el még jobb és még tartósabb eredményeket**. Az elkötelezettségüknek, a költségvetésüknek, valamint a preferenciáiknak megfelelően 4 különböző stratégiát is kínálhat nekik:

CLICK Megismétlés

CLICK kezelés 3-6 havonta
A BlancOne® CLICK egy nagyon gyengéd kezelés, amit bárki megengedhet magának, és emiatt gyakran megismételhető. Ideális kiegészítője minden egyes higiéniai kezelésnek.

TOUCH Eredmény fokozása

az eredmény tovább fokozható a TOUCH intenzív kezelésnek köszönhetően.
A BlancOne® TOUCH a CLICK intenzív változata, amely 3-4 ciklust igényel minden egyes kezelés során. Ez egy **kíméletlen, de egyúttal hatékony fogfehérítő kezelés**, amely **mélyebb penetrációt és tartósabb fehérséget** eredményezhet.

HOME Kombinálás

A rendelői kezelés kombinálása a Home®-al
A CLICK **gyors eredménye még tovább megőrizhető, vagy akár tovább is fokozható a BlancOne® HOME®** otthoni sines kezeléssel kombinálva. A HOME+ három változatban kapható: DAY FAST (napközbeni gyors), NIGHT (éjszakai) és EVER (éjszakai szintetartó, érzékeny fogakra, vagy alignerbe).

RITUALS Szintentartás

a RITUALS termékekkel
A BlancOne® RITUALS a **ragyogó mosoly és a mindennapi egészségmegőrzés** érdekében készült terméksalád, amely az eredmények fenntartása érdekében **kombinálható bármely rendelésben végzett kezeléssel**. A Rituals termékeink közé tartoznak:
- DUETTO ACTIVE és DUETTO CARE fogkrémek
- BlancOne® STICK fogfehérítő toll
- BlancOne® BRUSH fogfehérítő fogkefe
- BlancOne® LIPS ajakbalzsam
A RITUALS termékek egyenként, és a **3 hónapos karbantartó programhoz összeállított Rituals díszdobozban is** kaphatók.

ULTRA Klinikai kezelés

erősen elszíneződött fogakhoz
A BlancOne® ULTRA+ a terméksalád legprofesszionálisabb tagja, amely **fotokémiai aktiválással végzett professzionális klinikai kezelés 35%-os hidrogén-peroxid tartalommal a nehezebb esetekhez, vagy a különleges igényekkel rendelkező páciensek számára**. Alkalmos erős elszíneződések, például tetraciklin foltok, valamint nem vitális fogak kezelésére is. Az ULTRA+ inymaszk használatát igényli, és akár 4 rövid (8 perces) ciklusban is alkalmazható egy kezelésben belül, hogy igazán meglepő eredmények szülessenek, mindez érzékenység nélkül.

A BlancOne® ULTRA+ kifejezetten fogorvosi kezelés (93/42-es EU irányelv). Használatát egyes uniós országokban a helyi szabályozás korlátozhatja.



RENDELŐBEN

OTTHON

BlancOne® ARCUS+ Foto-aktívációs lámpa

Az innovatív BlancOne® technológia lehetővé tette az exkluzív BlancOne® ARCUS lámpa kifejlesztését, amelynek használata **számos előnnyel jár**:

- ✓ **A BlancOne® kezelések csúcsteljesítménye** a BlancOne® Arcus lámpa használatával **együtt érhető el**.
- ✓ **10 nagy teljesítményű 5 wattos led lámpa garantálja a legjobb hatékonyságot**, és a BlancOne® protokollokban jelzett **gyors időt**.
- ✓ **A széles ív és a ledék elhelyezkedése a fogív teljes szélességében garantálja a gél aktiválását**, beleértve a moláris területet is.

A BlancOne® ARCUS+ két változatban kapható: mobil gurulós állvánnyal vagy fogászati székre rögzíthető változatban.

Minden ARCUS+ lámpa **önállóan, vagy induló készletben is rendelhető**, melyek az alábbi kiegészítőket is tartalmazzák:

CUBE Starter Set BlancOne® kezelésekkel és kiegészítőkkel, vagy **CARE** Accessory Set a biztonságos és kényelmes kezelésekhez.

Marketing

BlancOne® különböző programokat és eszközöket is biztosít a **rendelőben történő fogfehérítő kezelések népszerűsítéséhez**:

- **Marketingeszközök**, melyek segítenek a fogfehérítő kezelések népszerűsítésében.
- **Dedikált applikáció** a fogfehérítés folyamatához és nyomkövetéshez.
- **Pácienseinek szóló promóciók**, "White for Life" hűségprogram, és nyílt napok lehetősége.
- **Közösségi csatornák és weboldal** amelyhez csatlakozhat, hogy több új páciént fogadhasson.
- **Térkép a BlancOne® Hitelesített központokkal**, hogy új páciensek is megtalálhassák Önt.



Az új páciensek aktívan keresik Önt...



Válljon BlancOne® központtá Váloztassa Ön is rendelőjét a fogfehérítés kitüntetett központjává

A **betegek számára** a BlancOne® nem csak innovatív és biztonságos kezeléseket jelent. Az, hogy a fogfehérítést egy **hivatalos központban**, a fogfehérítésre vonatkozó európai irányelv előírásai alapján **képzett szakemberek** végzik, egyben a **garancia** is.

A kezelések QR-kódjainak a BlancOne® PRO alkalmazással történő beolvasásával, valamint a BlancOne® Academy tanfolyamain keresztül **kredítpontokat** **szerezhet**, melyekkel növelheti saját és a központ szakmai színvonalát. Az induló csomagokban szereplő **kezelések és a BlancOne® Academy** weboldalon elérhető alapvető oktatóprogramok elvégzése már elegendő ahhoz, hogy **akkreditálja rendelőjét a BlancOne hivatalos weboldalán** közzétett BlancOne Authorized Centers (hivatalos központok) közé.

A képzési kredítpontokkal párhuzamosan a BlancOne® kezelések és tanfolyamok révén rajongói üzletpontokat is **szerezhet**, amelyekkel **ingyenesen kaphat RITUALS termékeket, kiegészítőket és marketinganyagokat**, hogy még könnyebben népszerűsíthesse a fogfehérítést, és elégedetté tegye pácienseit.

Regisztráljon most BlancOne szakemberként a blancone.eu/pro weboldalon vagy a BlancOne® PRO alkalmazás letöltésével, és férjen hozzá az Ön és rendelője számára biztosított előnyökhöz.

BlancOne® PRO App: Egy hatékony eszköz a BlancOne® szakemberek számára

Amellett, hogy képzési kredítpontokat **szerezhet** az Ön és a Központja szakmai képzettségének növeléséhez, a BlancOne® PRO alkalmazás számos előnyt kínál, amelyekkel még **különlegesebbé** teheti BlancOne® fogfehérítő kezeléseket.

A QR-kód egyszerű beolvasásával az alkalmazás lehetővé teszi, hogy **profilokat készítsen** a páciensekről, megadva az eset **nehézségi indexét** és a neki **ajánlott kezeléseket**. Gyorsan és egyszerűen hozhat létre **kezelési kártyát**, amelyen összegyűjtheti az összes információt (kezelés típusa, előtte és utána árnyalatok és fotók, esetleges nem kívánt hatások, kiegészítő szintetartó termékek, kontrol vizsgálatok stb.). A rendszer **igazolást küld a páciensnek az elvégzett kezelésről**, akinek így **lehetősége lesz véleményt adni**.

Az applikáción keresztül szolgáltatott adatok alapján a BlancOne® portal dedikált területén elérhetővé válik egy **adatbázis olyan statisztikákkal** is, amelyek lehetővé teszik, hogy **nyomon kövessék és fejlessze** a rendelő fehérítő üzletágát.

Töltse le a BlancOne® PRO alkalmazást akár most



BlancOne® Academy A fogfehérítés legmodernebb technológiája

Az Akadémia **teljes körű és professzionális fogfehérítő képzést** kínál a BlancOne® szakemberek részére, amely **tudományos kutatásokon** és egy nemzetközi fogorvosokból és dentálhigiénikusokból álló csapat **tapasztalatain** alapul.

A **webinárok, személyes rendezvények és on-demand tanfolyamok** révén növelheti készségeit a fogfehérítő kezelések ajánlása és a legjobb eredmények megvalósítása érdekében, hogy minden páciensének az igényeinek legmegfelelőbb megoldást kínálhassa.

Az Akadémia tanfolyamai 3 területre oszlanak:

- ✓ **SCIENCE** - tudjon meg többet a fogfehérítés mögött álló **folyamatokról és tudományos bizonyítékokról**.
- ✓ **CLINIC** - fedezze fel az egyes esetek kezeléséhez szükséges legjobb **technikákat, protokollokat és trükköket**.
- ✓ **EXPERIENCE** - a fogfehérítés **helyes módja** és a pozitív **fogfehérítési élmény** biztosítása.

A **BlancOne® Akadémiához** már **most hozzáférhet** a professzionális fiókjával: academy.blancone.eu

